



## TOSATRICI AESCULAP® PER PICCOLI E GROSSI ANIMALI

2019

# INDICE

---

## PRODOTTI PER PICCOLI ANIMALI

### Sistema Testine Favorita

Favorita II	5
Favorita SPEED	6
Favorita CL e Hybrid	7
TestineFavorita	8
Accessori Favorita	10

### Sistema testine Universali

FAV5	12
Durati	13
Testine Universali	14
Accessori testine Universali	15

---

## TRIMMER

Akkurata	17
Exacta	18
Coltellini per stripping	19

---

## TOSATRICI PER GROSSI ANIMALI

### Tosatrici per cavalli

Econom Equipe	21
Bonum per cavalli	22

### Tosatrici per bovini

Econom II per bovini	23
Bonum per bovini	24
Lame Econom	25

### Tosatrici per pecore

Econom II per pecore	36
----------------------	----

Torqui per Econom/Bonum	37
-------------------------	----

# SISTEMA AESCULAP® TESTINE FAVORITA

## Sistema di testine unico nel suo genere

- regolazione della pressione delle piastre tramite la vite a testa zigrinata a seconda del tipo di pelo
- risultato di taglio ottimale in base al pelo, anche se molto fine
- regolazione della pressione delle testine, con conseguente aumento della durate delle stesse
- le molle a balestra garantiscono una ripartizione ottimale della pressione sulla piastra superiore e pertanto un taglio uniforme

## Tosatrici

- corpo esterno prodotto con una speciale materia plastica infrangibile
- bilanciere non soggetto a usura
- il sistema di ventilazione attentamente studiato contro il surriscaldamento
- lunga durata
- batterie agli ioni di litio
- motori di produzione Aesculap®



# Sistema testine Favorita



pressione delle piastre regolabile




ventilazione ottimale



interruttore in posizione ergonomica

## Operazioni per la manutenzione delle testine Favorita

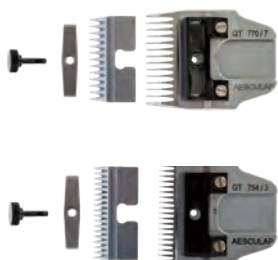

Smontare



Pulire



Asciugare



Oliare

- prestare attenzione a una pulizia particolarmente accurata degli spazi vuoti tra i denti.
- In caso di impiego di disinfettanti, asciugare con cura le testine per evitare la corrosione.
- Dopo la pulizia, oliare le testine



Le lame devono essere oliate con la testina montata prima di ogni utilizzo!

Durante il lavoro si deve eseguire l'oliatura ogni 5-10 minuti. A tal fine si applicano 3 gocce dello speciale olio per tosatrici sui denti e 2 gocce tra i denti.



Per l'oliatura tra le lame è perfettamente indicato anche un olio spray con tubetto applicatore.

Dopo l'oliatura si deve far girare a vuoto la macchina per alcuni secondi in modo che l'olio si distribuisca correttamente e non venga trasferito sul pelo dell'animale.

# Sistema testine Favorita



## FAVORITA II - Tosatrice Aesculap® a filo

Potente e silenziosa, affidabile e robusta, sviluppata per l'uso quotidiano - la tosatrice per i professionisti.

- funzionamento pressoché senza vibrazioni - motore potente, con cuscinetto
- taglio di alta qualità costante - bilanciere non soggetto a usura
- sistema di ventilazione ottimale con filtro aria facile da pulire
- design snello ed ergonomico in plastica speciale infrangibile
- interruttore sul lato anteriore della macchina per comodo uso con una mano
- testina non compresa in dotazione

Codice	Descrizione
GT104	Tosatrice Favorita II

Dati tecnici	
Sistema testina:	Aesculap® Favorita
Azionamento:	Universal
Numero di battute:	circa 2.300 battute/min
Trasmissione:	Ruota elicoidale
Tensione:	230 Volt
Potenza:	35 Watt
Rumorosità:	70 dB
Peso:	ca. 650 g (senza cavo)
Lunghezza cavo:	circa 5 m
Dotazione:	1 tosatrice Favorita II (GT104) + 1 olio Aesculap® (GT604) + 1 istruzioni per l'uso + 1 valigetta rigida robusta



# Sistema testine Favorita



## FAVORITA SPEED - Tosatrice Aesculap® a filo

La tosatrice professionale a 3.000 battute/min.

- funzionamento pressoché senza vibrazioni - motore potente, con cuscinetto
- taglio di alta qualità costante - bilanciere non soggetto a usura
- sistema di ventilazione ottimale con filtro aria facile da pulire
- design snello ed ergonomico in plastica speciale infrangibile
- interruttore sul lato anteriore della macchina per comodo uso con una mano
- testina non compresa in dotazione

Codice	Descrizione
GT114	Tosatrice Favorita SPEED

Dati tecnici	
Sistema testina:	Aesculap® Favorita
Azionamento:	Universale
Numero di battute:	ca. 3.000 battute/min
Trasmissione:	Ruota elicoidale
Tensione:	230 Volt
Potenza:	35 Watt
Rumorosità:	70 dB
Peso:	ca. 650 g (senza cavo)
Lunghezza cavo:	circa 5 m
Dotazione:	1 tosatrice Favorita SPEED (GT114) + 1 olio Aesculap® (GT604) + 1 istruzioni per l'uso + 1 valigetta rigida robusta



# Sistema testine Favorita



## FAVORITA CL / HYBRID - Tosatrice Aesculap® a batteria

Per tutti coloro che preferiscono una Favorita CL con cavo, ma non desiderano rinunciare alla possibilità di scegliere il funzionamento a batteria, la variante ibrida offre tutte le opzioni!

- funzionamento pressoché senza vibrazioni - motore potente, con cuscinetto
- taglio di alta qualità costante - bilanciere non soggetto a usura
- sistema di ventilazione ottimale con filtro aria facile da pulire
- design snello ed ergonomico in plastica speciale infrangibile
- Possibilità di funzionamento continuativo grazie alla seconda batteria
- testina non compresa in dotazione



Codice	Descrizione
GT206	Tosatrice a batteria Favorita CL
GT208	Tosatrice Favorita CL Hybrid
GT207	Adattatore incl. alimentatore per apparecchio ibrido


Dati tecnici	Favorita CL	Favorita Hybrid
Sistema testina:	Aesculap® Favorita	Aesculap® Favorita
Azionamento:	Motore DC	Motore DC
Numero di battute:	circa 2.300 battute/min	circa 2.500 battute/min
Trasmissione:	Trasmissione a planetari	Trasmissione a planetari
Tecnologia della batteria:	1200 mAh, agli ioni di litio	-
Durata:	ca. 60 min	-
Tempo di carica:	ca. 50 min	-
Lunghezza cavo:	-	circa 3 m
Rumorosità:	65 dB	70 dB
Peso:	ca. 475 g (incl. batteria + testina tosatrice 3 mm)	circa 360 g (con testina, senza adattatore)
Dotazione:	1 tosatrice a batteria Favorita CL + 1 unità di carica (GT203) + 2 batterie agli ioni di litio (GT201) + 1 olio Aesculap® (GT604) + 1 istruzioni per l'uso + 1 valigetta rigida robusta	1 tosatrice Favorita CL (GT200) + 1 adattatore incl. alimentatore (GT207) + 1 olio Aesculap® (GT604) + 1 istruzioni per l'uso

# Sistema testine Favorita


## Testine Aesculap® - Sistema Favorita

Affilatura di lunga durata grazie all'acciaio al carbonio

- elevata qualità di lavorazione da parte dei centri di produzione CNC Aesculap®, tutti i componenti vengono fresati o affilati sul profilo
- durata del taglio uniforme grazie alla pressione regolabile delle piastre
- rivestimento high-end delle superfici per un'elevata protezione contro la corrosione

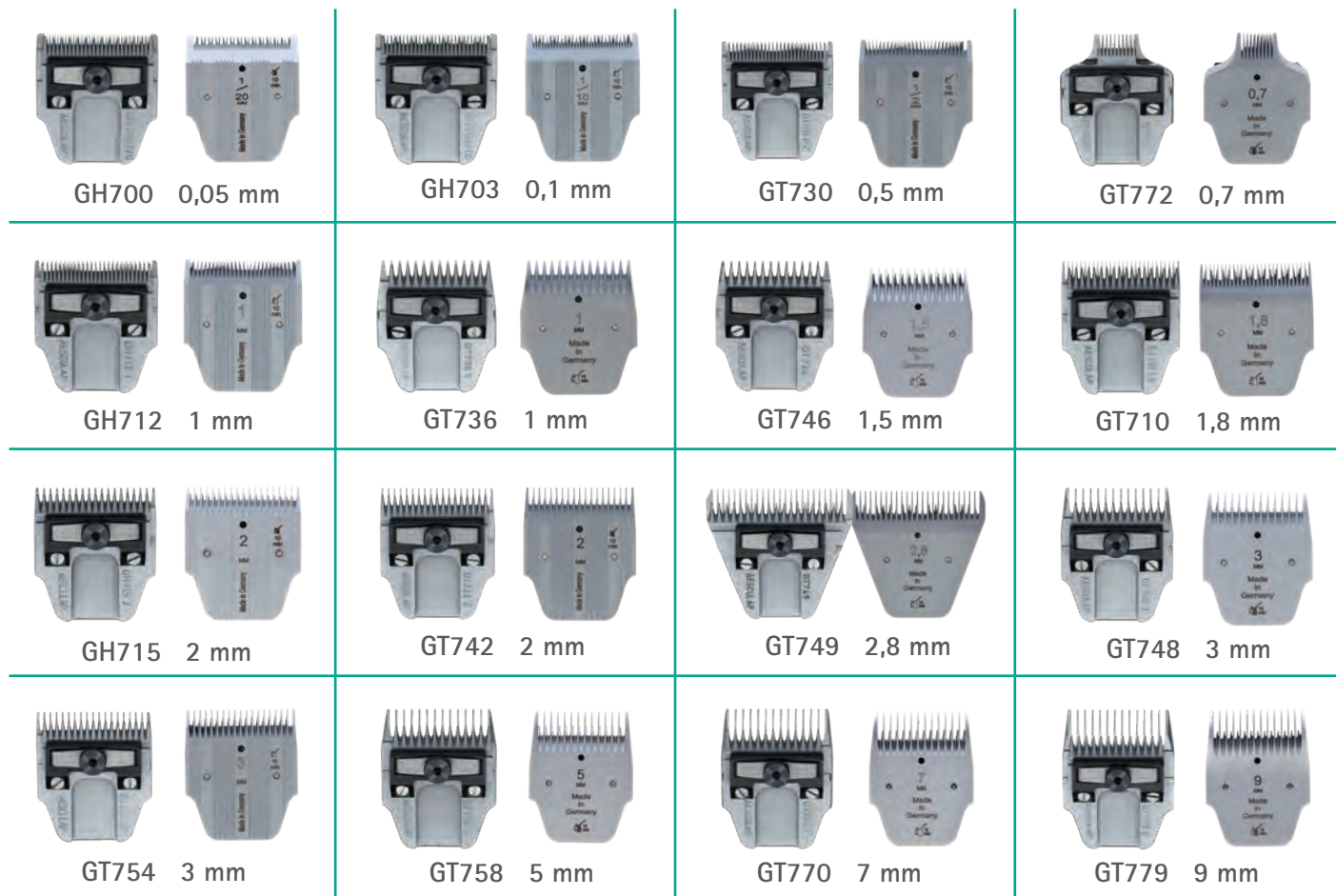

Codice	Lunghezza di taglio	Larghezza del taglio
GH700	0,05 mm	40 mm
GH703	0,1 mm	40 mm
GT730	0,5 mm	40 mm
GT772	0,7 mm	20 mm
GH712	1 mm	40 mm
GT736	1 mm	40 mm
GT746	1,5 mm	40 mm
GT710	1,8 mm	40 mm
GH715	2 mm	40 mm
GT742	2 mm	40 mm
GT749	2,8 mm	60 mm
GT748	3 mm	40 mm
GT754	3 mm	40 mm
GT758	5 mm	40 mm
GT770	7 mm	40 mm
GT779	9 mm	40 mm
GT782	12 mm	40 mm
GT784	16 mm	40 mm

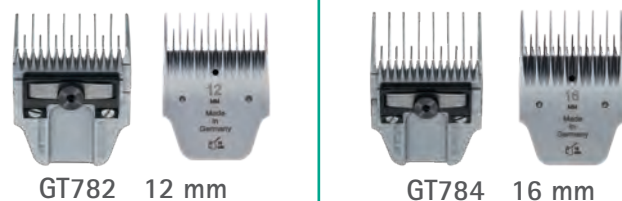

Far affilare o riparare le testine e le tosatrici solo presso i centri di assistenza indicati nelle istruzioni per l'uso o da un rivenditore autorizzato!



# Sistema testine Favorita



## Testine Aesculap® Favorita con rivestimento DLC

Taglio molto durevole grazie all'acciaio al carbonio di alta qualità e al rivestimento DLC (DIAMOND LIKE CARBON)

Vantaggi del rivestimento DLC:

- protezione elevata dall'usura e intervalli di riaffilatura prolungati
- minore sviluppo di calore
- più protezione dalla corrosione
- migliore scorrevolezza



GT754D



GT758D



GT770D



GT779D



Codice	Lunghezza di taglio	Larghezza di taglio
GT754D	3 mm	40 mm
GT758D	5 mm	40 mm
GT770D	7 mm	40 mm
GT779D	9 mm	40 mm

# Sistema testine Favorita

## Rialzi Aesculap® per testine Favorita

- da utilizzare con le testine Favorita GH700, GT736, GT746 e GT710
- taglio ottimale e uniforme
- varie lunghezze di taglio possibili
- passa facilmente attraverso il pelo
- facili e veloci da innestare
- set GT170 composto da 5 pettini a innesto Aesculap® (disponibili anche singolarmente)



GT170



GT177 25,0 mm



GT176 22,0 mm



GT175 19,0 mm



GT174 16,0 mm



GT173 13,0 mm

Codice	Descrizione	Lunghezza di taglio
GT170	Set di pettini a innesto Favorita	-
GT173	Pettine a innesto Favorita	13 mm
GT174	Pettine a innesto Favorita	16 mm
GT175	Pettine a innesto Favorita	19 mm
GT176	Pettine a innesto Favorita	22 mm
GT177	Pettine a innesto Favorita	25 mm
GT145	Set a coda di rondine	-

## Torqui- Chiave dinamometrica Aesculap®

Per regolazione precisa della pressione delle lame di taglio

- regolazione precisa della pressione delle piastre
- aumento della durata della testina grazie a intervalli di riaffilatura più lunghi
- uniformità del taglio nel tempo
- facile da utilizzare
- non necessita di manutenzione
- strumento di precisione
- utilizzabile con tutte le testine Favorita
- ogni testina Favorita può essere dotata dell'apposita vite con invito



GT143



GT142



Codice	Descrizione
GT142	Torqui- Chiave dinamometrica Aesculap®
GT143	Vite con invito per Torqui, sistema Favorita, confezione da 5 pezzi

# SISTEMA AESCULAP® TESTINE UNIVERSALI

Il sistema testine Universali di Aesculap® si contraddistingue per:

- tosatrici compatibili con tutte le testine Universali del commercio
- testina GT330 inclusa nella confezione
- batterie agli ioni di litio
- motori di produzione Aesculap®



# Sistema testine Universali



## FAV5 - Tosatrice Aesculap® a filo

Potente e silenziosa, affidabile e robusta, sviluppata per un impiego quotidiano di lunga durata: la macchina per i professionisti, con sistema di testine Universali

- tecnologia Aesculap® con sistema di testine Universali compatibile con i marchi della concorrenza
- taglio di alta qualità costante - bilanciere non soggetto a usura
- sistema di ventilazione ottimale con filtro aria facile da pulire
- design snello ed ergonomico in plastica speciale infrangibile
- testina GT330 compresa in dotazione

Codice	Descrizione
GT105	Tosatrice FAV5

Dati tecnici	
Sistema testina:	Aesculap® Universali e sistemi compatibili
Azionamento:	Universale
Numero di battute:	ca. 2.300 battute/min
Trasmissione:	Ruota elicoidale
Tensione:	230 Volt
Potenza:	35 Watt
Rumorosità:	ca. 70 dB
Peso:	ca. 650 g (senza cavo)
Lunghezza cavo:	circa 5 m

Dotazione:	1 tosatrice FAV5 (GT105)
	+ 1 testina (GT330) (1,5 mm)
	+ 1 olio Aesculap® (GT604)
	+ 1 istruzioni per l'uso
	+ 1 valigetta rigida



# Sistema testine Universali



## DURATI - tosatrice Aesculap® a batteria

Grazie al peso ridotto e bilanciato, abbinato alle consuete prestazioni evolute di Aesculap® e alla lunga durata della batteria, nasce un prodotto top nel segmento testine Universali.

- potente batteria con tecnologia agli ioni di litio e funzionamento superiore a 3 ore
- avvio soft a protezione del motore/trasmissione e della batteria agli ioni di litio
- velocità di taglio elevata con 3000 battute al minuto per un risultato di taglio ottimale
- elevata potenza di taglio
- impugnatura ergonomica
- peso ridottissimo per utilizzo prolungato
- base di carica con scomparti per la tosatrice e la batteria
- testina GT330 compresa in dotazione

Codice	Descrizione
XT434-SR	Tosatrice a batteria Durati, 1 batteria
XT436-SR	Tosatrice a batteria Durati, 2 batterie
XT431	Batteria di ricambio

Dati tecnici	
Sistema testina:	Aesculap® Universali e sistemi compatibili
Azionamento:	Motore EC
Numero di battute:	circa 3000 battute/min
Trasmissione:	bilanciere/eccentrico
Tecnologia a batteria:	ioni di litio; 2850 mAh
Durata:	ca. 240 min
Tempo di carica:	ca. 240 min
Rumorosità	63 dB
Peso:	380 g (con testina e batteria)
Dotazione:	1 tosatrice Durati
	+ 1 testina GT330 (1,5 mm)
	+ 1 batteria (XT431)
	+ 1 base caricabatterie (XT433)
	+ 1 olio Aesculap® (GT604)
	+ 1 istruzioni per l'uso



La nuova generazione di batterie agli ioni di litio sviluppata per la Durati è adatta anche alla Favorita CL e alla Fav5 CL e naturalmente è compatibile con le relative basi di carica.

# Sistema testine Universali

## Testine Aesculap® Universali

Qualità riconosciuta per l'uso professionale

- affilatura prolungata grazie all'acciaio al carbonio pregiato
- qualità di lavorazione Aesculap® con componenti fresati o affilati sul profilo
- rivestimento high-end delle superfici per un'elevata protezione contro la corrosione



GT305 0,2 mm



GT310 0,25 mm



GT317 0,5 mm



GT320 0,8 mm




GT323 0,8 mm 2,4 cm




GT326 1,2 mm




GT330 1,5 mm

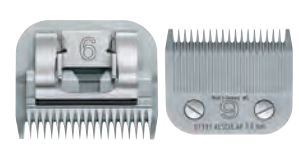

GT333 2,0 mm

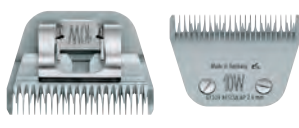


GT339 2,4 mm 6,3 cm

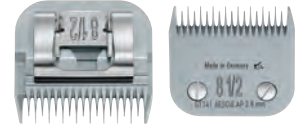


GT341 2,8 mm




GT343 3,2 mm

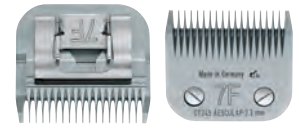

GT345 3,2 mm

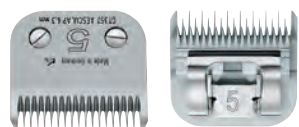

GT357 6,3 mm

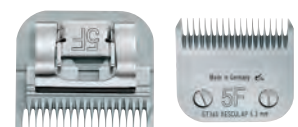

GT360 6,3 mm



GT366 9,5 mm



GT364 9,5 mm

Codice	Misura	Lunghezza di taglio	Larghezza del taglio
GT305	50	0,2 mm	40 mm
GT310	40	0,25 mm	40 mm
GT317	30	0,5 mm	40 mm
GT320	5/8	0,8 mm	20 mm
GT323	7/8	0,8 mm	20 mm
GT326	15	1,2 mm	40 mm
GT330	10	1,5 mm	40 mm
GT333	9	2 mm	40 mm
GT339	10 wide	2,4 mm	60 mm
GT341	8 1/2	2,8 mm	40 mm
GT343	7	3,2 mm	40 mm
GT345	7 F	3,2 mm	40 mm
GT357	5	6,3 mm	40 mm
GT360	5 F	6,3 mm	40 mm
GT366	4	9,5 mm	40 mm
GT364	4 F	9,5 mm	40 mm

Far affilare o riparare le testine e le tosatrici solo presso i centri di assistenza indicati nelle istruzioni per l'uso o da un rivenditore autorizzato!

# Sistema testine Universali

## Rialzi Aesculap® per testine Universali

- da utilizzare con le testine GT317, GT326, GT330 e GT333
- taglio ottimale e uniforme
- varie lunghezze di taglio possibili
- passano facilmente attraverso il pelo
- facili e veloci da montare
- set GT130 composto da 5 pettini a innesto universale (disponibili anche singolarmente)



GT130



GT133 13 mm    GT134 16 mm    GT135 19 mm    GT136 22 mm    GT137 25 mm

Codice	Descrizione	Lunghezza di taglio
GT130	Set pettini ad innesto SnapOn	-
GT133	Pettine a innesto SnapOn	13 mm
GT134	Pettine a innesto SnapOn	16 mm
GT135	Pettine a innesto SnapOn	19 mm
GT136	Pettine a innesto SnapOn	22 mm
GT137	Pettine a innesto SnapOn	25 mm

## Supporto Aesculap® per testine

- in plastica
- per conservare a portata di mano 5 testine

Codice  
GH575



## Aesculap® BladeCool

- spray tecnico efficacissimo che raffredda e pulisce immediatamente le lame
- facile da usare: spruzzare sulla lama prima e durante l'utilizzo
- migliora il risultato della tosatura e mantiene lame e testine affilate più a lungo
- rimuove efficacemente i residui di peli e di sporco



Codice    Contenuto  
GTA100    500 ml

## Olio Aesculap® per tosatrici

Olio speciale per tutte le tosatrici Aesculap® da applicare sulle parti mobili della testina e al suo interno.



Codice    Contenuto  
GT604    90 ml

# TRIMMER





# Trimmer



## AKKURATA - Tosatrice Aesculap® a batteria

Ideale per tosare zone di piccole dimensioni sui cani, ad es. dorso, collo, pancia, testa e muso.

- ottimi risultati di taglio grazie alla testina realizzata con una lega di acciaio al carbonio
- ottima impugnatura grazie al design ergonomico
- peso ridotto di solo 250 g incl. batteria e testina
- batteria agli ioni-litio
- funzionamento molto silenzioso e senza vibrazioni
- 5 pettini (4, 8, 12, 16, 20 mm)

Codice	Descrizione
GT405	Tosatrice a batteria Akkurata
GT606	Testina per GT405 e GT410

Dati tecnici	
Sistema testina:	Aesculap® Dedicata
Azionamento:	Motore DC
Numero di battute:	ca. 4.800 battute/min
Tecnologia della batteria:	800 mAh, agli ioni di litio
Durata:	ca. 100 min.
Tempo di carica:	ca. 60 min.
Larghezza di taglio:	40 mm
Lunghezza di taglio	regolabile in 3 posizioni: 0,5 / 1,5 / 2,5 mm
Rumorosità	ca. 60 dB
Peso:	ca. 250 g (incl. batteria e testina tosatrice)

Dotazione:	1 tosatrice a batteria Akkurata (GT405)
	+ 1 testina (GT606)
	+ 5 pettini a innesto (4, 8, 12, 16, 20 mm)
	+ 1 spazzola
	+ 1 unità di carica
	+ 1 olio Aesculap® (GT604)
	+ 1 istruzioni per l'uso





## EXACTA - Tosatrice Aesculap® a batteria

Specifica per zone estremamente delicate, ad es. spazi interdigitali e contorno occhi

- ottimi risultati di taglio grazie alla testina realizzata con una lega di acciaio al carbonio
- sta perfettamente nella mano grazie alla forma snella
- peso ridotto di solo 120 g incl. batteria e testina
- funzionamento molto silenzioso e senza vibrazioni
- batteria agli ioni-litio



Codice	Descrizione
GT416	Tosatrice a batteria Exacta
GT608	Testina per GT415, GT416, GT420, GT421










Dati tecnici	
Sistema testina:	Aesculap® Dedicata
Azionamento:	Motore DC, 3,6 V
Numero di battute:	ca. 5.700 battute/min
Tecnologia della batteria:	3,7 V, agli ioni di litio
Durata:	ca. 90 - 120 min
Tempo di carica:	ca. 90 min
Larghezza di taglio:	24 mm
Lunghezza di taglio	0,5 mm
Rumorosità	ca. 60 dB
Peso:	ca. 115 g (incl. batteria e testina tosatrice)

Dotazione:	1 tosatrice a batteria Exacta
	+ 1 testina 0,5 mm (GT608)
	+ 1 unità di carica
	+ 1 pettine a innesto regolabile su 4 diverse lunghezze di taglio (3 - 6 mm)
	+ 1 spazzola
	+ 1 olio Aesculap® (GT604)
	+ 1 istruzioni per l'uso

# Coltellini per stripping

## Coltellini Aesculap® per stripping

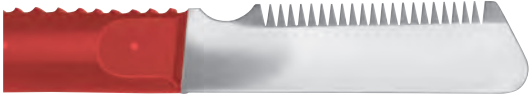- lama durevole in acciaio inossidabile
- impugnatura strutturata per una buona maneggevolezza
- impugnatura in materiale sintetico, facile da pulire

VH320R	Lama corta, dentatura fine, 160 mm	Per orecchie, zone di passaggio, ritocchi, testa e guance, collo e coda	
VH321R	Dentatura molto fine, 195 mm	Utilizzabile per Epagneul/Setter	
VH325R	Modello inglese, 180 mm	Westie, Bassotto a pelo duro, anche altri Terrier con sottopelo normale o scarso	
VH326R	Dentatura molto fine, 180 mm	Per lavori di rifinitura/ritocco, taglio di peli residui isolati, adatta anche per orecchie, collo e zona della testa, dove il pelo viene tagliato molto corto	
VH327R	Dentatura fine, 190 mm	Per pelo fine, sottopelo fine normale o scarso, per parti del corpo che devono essere rifinite corte e con estrema precisione, per sottopelo	
VH328R	Dentatura media, 190 mm	Per pelo normale con sottopelo equilibrato, per il mantello del Terrier, il dorso e i fianchi (Westie, Fox, Scottish, Airdale, Lakeland, Schnauzer), anche per più sottopelo	
VH329R	Dentatura grossolana, 190 mm	Per pelo forte o folto con sottopelo (Airedale, Fox, Scottish, Welsh), adatta per tutti i Terrier e Schnauzer, per sella, mantello	
VH333R	Secondo McClellan, dentatura fine, 145 mm	In presenza di sottopelo abbondante, per Cocker e Setter con molto sottopelo o pelo soffice, per cani quali Pastore tedesco, Labrador, ecc. con pelo consistente in sottopelo fitto e pelo di copertura di lunghezza media al fine di estrarre il pelo staccato	
VH334R	Secondo McClellan, dentatura grossolana, 145 mm	Rifinitura di cani con pelo duro, con onde scarse o assenti e sottopelo normale o scarso (ad es. Bassotto a pelo duro, Border Terrier, Parson Jack Russell ...)	

Codice	Lunghezza
VH320R	160 mm
VH321R	195 mm
VH325R	180 mm
VH326R	180 mm
VH327R	190 mm
VH328R	190 mm
VH329R	190 mm
VH333R	145 mm
VH334R	145 mm

# TOSATRICI PER GROSSI ANIMALI



# Tosatrici per cavalli



## ECONOM EQUIPE - Tosatrice Aesculap® a filo per cavalli

- alta velocità di tosatura grazie a potente motore
- ridotta rumorosità in linea con utilizzo su cavalli
- non si surriscalda grazie al raffreddamento ad aria
- alloggiamento snello e bilanciamento equilibrato del peso per più ergonomia
- facile da usare
- filtro sostituibile senza attrezzi - carbone facile da sostituire - circuito stampato a innesto
- accensione a controllo elettronico e protezione dal sovraccarico integrate
- qualità di taglio uniforme e durevole grazie a lame poco soggette all'usura
- le lame in acciaio al carbonio antiusura possono essere affilate più volte

### Dati tecnici

Sistema testina:	Set lame da tosatura
Azionamento:	Motore DC
Numero di battute:	circa 2.200 battute/min
Trasmissione:	Ruota dentata cilindrica
Tensione:	230 Volt
Potenza:	160 Watt
Rumorosità	ca. 70 dB
Peso:	ca. 1.200 g
Lunghezza cavo	circa 5 m

Dotazione:	1 tosatrice Econom Equipe
	+ 1 lama superiore (GT505)
	+ 1 lama inferiore (GT502) (3 mm)
	+ 1 olio Aesculap® (GT604)
	+ 1 istruzioni per l'uso
	+ 1 valigetta rigida robusta



Testina GT367 solo con piastra superiore GT505, piastra inferiore GT502, montabile anche su tosatrici per bovini

Codice

Descrizione

GT674

Econom Equipe tosatrice per cavalli

# Tosatrici per cavalli



## BONUM - Tosatrice Aesculap® a batteria per cavalli

La nuova tosatrice Aesculap® senza fili, con batterie agli ioni di litio è design sottile ed ergonomico. La BONUM ha un peso ridotto, una bassa rumorosità e una lunga durata di carica della batteria

La tosatrice BONUM inoltre è dotata di un sistema intelligente di batterie agli ioni di litio. La tecnologia a batteria protegge l'apparecchio dal surriscaldamento e in caso di temperatura della batteria >50° C il funzionamento si arresta fino al raffreddamento. Inoltre il caricabatterie segnala il livello di carica della batteria con due indicatori a LED.

- estremamente leggera, solo 900 g compresa batteria e lama
- diametro di soli 40 mm e dimensioni totali di 12,5 cm nella zona dell'impugnatura, pertanto presa eccellente anche per le mani piccole
- rumorosità molto piacevole
- molto corta e maneggevole grazie ai 295 mm di lunghezza
- molto ben bilanciata
- potente e resistente
- tecnologia al litio, quindi nessun effetto memory
- batteria di livello professionale
- nessun rischio di accensione/spegnimento involontario durante l'utilizzo, grazie al pulsante elettronico incassato nell'alloggiamento
- lame Aesculap® della serie Econom "Made in Germany"

Dati tecnici	
Sistema testina:	Set lame da tosatura
Azionamento:	Motore DC, 10,8 V
Numero di battute:	2500 battute/min.
Trasmissione:	Ruota dentata cilindrica
Tecnologia della batteria:	2000 mAh, agli ioni di litio
Durata:	80 min.
Tempo di carica:	55 min.
Rumorosità:	65 dB (A)
Peso con la batteria:	900 g
Dimensioni (L/H/L):	29,5 x 7,5 x 7,8 cm
Dotazione:	Tosatrice Bonum
	+ batteria (GT641)
	+ base di carica (GT643)
	+ set di lame (GT505 / GT502)
	+ istruzioni
	+ olio Aesculap® (GT604)
	+ valigetta rigida robusta

LED di livello carica verde:  
Lampeggiante = caricamento  
batteria in corso  
acceso = batteria carica



Codice	Descrizione	Colore
GT654-RO	Tosatrice a batteria Bonum equini, incl. 1 batterie, GT505 / GT502	rossa
GT656-RO	Tosatrice a batteria Bonum equini, incl. 2 batterie, GT505 / GT502	rossa
GT641	Batteria di ricambio	-

# Tosatrici per bovini



## ECONOM II -Tosatrice Aesculap® a filo per bovini

- alta velocità di tosatura grazie a potente motore
- ridotta rumorosità
- non si surriscalda grazie al raffreddamento ad aria
- alloggiamento snello e bilanciamento equilibrato del peso per più ergonomia
- facile da usare
- filtro sostituibile senza attrezzi - carbone facile da sostituire - circuito stampato a innesto
- accensione a controllo elettronico e protezione dal sovraccarico integrate
- qualità di taglio uniforme e durevole grazie a lame poco soggette all'usura
- le lame in acciaio al carbonio antiusura possono essere affilate più volte

### Dati tecnici

Sistema testina:	Set lame da tosatura
Azionamento:	Motore DC
Numero di battute:	circa 2750 battute/min
Trasmissione:	Ruota dentata cilindrica
Tensione:	230 Volt
Potenza:	200 Watt
Rumorosità	ca. 73 dB
Peso:	ca. 1.200 g
Lunghezza cavo:	circa 5 m

Dotazione:	1 tosatrice Econom II
	+ 1 lama superiore
	+ 1 lama inferiore
	+ 1 olio Aesculap® (GT604)
	+ 1 istruzioni per l'uso
	+ 1 valigetta rigida robusta

Codice	Descrizione
GT474	Tosatrice Econom II incl. set di lame (GT501, GT502)
GT475	Tosatrice Econom II incl. set di lame (GT503, GT504)
GT367	Testina con set di lame (GT501, GT502)
GT369	Testina con set di lame (GT578, GT588)

# Tosatrici per bovini



## BONUM - Tosatrice Aesculap® a batteria per bovini

La nuova tosatrice Aesculap® senza fili, con batterie agli ioni di litio è design sottile ed ergonomico. La BONUM ha un peso ridotto, una bassa rumorosità e una lunga durata di carica della batteria

La tosatrice BONUM inoltre è dotata di un sistema intelligente di batterie agli ioni di litio. La tecnologia a batteria protegge l'apparecchio dal surriscaldamento e in caso di temperatura della batteria >50° C il funzionamento si arresta fino al raffreddamento. Inoltre il caricabatterie segnala il livello di carica della batteria con due indicatori a LED.

- estremamente leggera, solo 900 g compresa batteria e lama
- diametro di soli 40 mm e dimensioni totali di 12,5 cm nella zona dell'impugnatura, pertanto presa eccellente anche per le mani piccole
- volume molto gradevole
- molto corta e maneggevole grazie ai 295 mm di lunghezza
- molto ben bilanciata
- potente e persistente
- tecnologia al litio, quindi nessun effetto memory
- batteria di livello professionale
- nessun rischio di accensione/spegnimento involontario durante l'utilizzo, grazie al pulsante elettronico incassato nell'alloggiamento
- lame Aesculap® della serie Econom "Made in Germany"

Dati tecnici	
Sistema testina:	Set lame da tosatura
Azionamento:	Motore DC 10,8 V
Numero di battute:	2.500 battute /min.
Trasmissione:	Ruota dentata cilindrica
Tecnologia della batteria:	2000 mAh, agli ioni di litio
Durata:	80 min.
Tempo di carica:	55 min.
Rumorosità:	65 dB (A)
Peso con la batteria:	900 g
Dimensioni (largxaltxlung):	29,5 x 7,5 x 7,8 cm
Dotazione:	Tosatrice Bonum + batteria (GT641) + base di carica (GT643) + set di lame (GT501 / GT502) + istruzioni + olio Aesculap® (GT604) + valigetta rigida robusta

LED di livello carica verde:  
Lampeggiante = caricamento  
batteria in corso  
acceso = batteria carica



Codice	Descrizione
GT644-BL	Tosatrice a batteria Bonum bovini, incl. 1 batteria, GT501 / GT502
GT646-BL	Tosatrice a batteria Bonum bovini, incl. 2 batterie, GT501 / GT502
GT641	Batteria di ricambio



# Lame superiori / inferiori per Grossi Animali

## Lame Aesculap®

- durata molto elevata grazie all'acciaio al carbonio antiusura
- le superfici di taglio possono essere riaffilate molto spesso
- rivestimento della superficie resistente
- 100 % Made in Germany
- durezza ottimale grazie all'indurimento a vuoto
- prodotte su macchine CNC con la garanzia di un livello di qualità costantemente elevato

Combinazione	Lama superiore	Lama inferiore	adatto per
dentatura stretta	GT501	GT502	Bovini ed equini tosatura standard 3 mm
dentatura stretta	GT501	GT511	Tosatura industriale (ad es. pelliccia)
dentatura stretta	GT505	GT502	Bovini ed equini - per tosatura standard liscia a 3 mm
dentatura stretta	GT505	GT508	Bovini (tosatura mammelle), equini e tosatura industriale (ad es. pelliccia)
dentatura stretta	GT505	GT511	Bovini ed equini - per una tosatura molto fine e liscia a 1 mm
dentatura stretta	GT505	GT506	Bovini, cani e capre 3 mm
dentatura media	GT505	GT507	Bovini, 3 mm
dentatura media	GT505	GT510	Cani e capre 5 mm
dentatura larga	GT503	GT504	Bovini, ovini a pelo fine e pecore di pregio 3 mm

## Lama superiore



GT501 15 denti



GT505 23 denti



GT503 17 denti

## Lama inferiore



GT504 3,0 mm 18 denti



GT506 3,0 mm 21 denti



GT506 3,0 mm 23 denti



GT502 3,0 mm 31 denti



GT508 0,1 mm 51 denti



GT510 5,0 mm 24 denti



GT511 1,0 mm 31 denti

Codice	Descrizione	Lunghezza di taglio	Uso
GT501	Lama superiore (15 denti)	-	Bovini e cavalli, tosatura standard
GT502	Lama inferiore (31 denti)	3 mm	Bovini e cavalli, tosatura standard
GT503	Lama superiore (17 denti)	-	Bovini, pecore, pecore a pelo fine
GT504	Lama inferiore (18 denti)	3 mm	Bovini, pecore, pecore a pelo fine
GT505	Lama superiore (23 denti)	-	Cavalli e bovini
GT507	Lama inferiore (21 denti)	3 mm	Bovini
GT506	Lama inferiore (23 denti)	3 mm	Bovini, cani, capre
GT508	Lama inferiore (51 denti)	0,1 mm	Cavalli, bovini (mammelle) e tosatura industriale
GT511	Lama inferiore (31 denti)	1 mm	Cavalli e bovini - per una tosatura molto fine, liscia
GT510	Lama inferiore (24 denti)	5 mm	Cani, capre e sindrome di Cushing (cavalli)

# Tosatrici per pecore



## ECONOM II - Tosatrice Aesculap® per pecore

- alta velocità di tosatura grazie a potente motore
- ridotta rumorosità
- non si surriscalda grazie al raffreddamento ad aria
- alloggiamento snello e bilanciamento equilibrato del peso per più ergonomia
- facile da usare
- filtro sostituibile senza attrezzi - carbone facile da sostituire - circuito stampato a innesto
- accensione a controllo elettronico e protezione dal sovraccarico integrate
- qualità di taglio uniforme e durevole grazie a lame poco soggette all'usura
- le lame in acciaio al carbonio antiusura possono essere affilate più volte

### Dati tecnici

Sistema testina:	Set lame da tosatura
Azionamento:	Motore DC
Numero di battute:	circa 2750 battute/min
Trasmissione:	Ruota dentata cilindrica
Tensione:	230 Volt
Potenza:	200 Watt
Rumorosità:	ca. 76 dB
Peso:	ca. 1.200 g
Lunghezza cavo:	circa 5 m

Dotazione:	1 macchina Econom II
	+ 1 lama superiore (GT578)
	+ 1 lama inferiore (GT588) (3,5 mm)
	+ 1 olio Aesculap® (GT604)
	+ 1 valigetta rigida robusta

Codice	Descrizione
GT494	Tosatrice Econom II
GT369	Testina con set di lame (GT578, GT588)



Codice	Descrizione	Lunghezza di taglio
GT578	Lama superiore (4 denti)	-
GT588	Lama inferiore (13 denti)	3,5 mm
GT594	Lama inferiore (13 denti)	3,5 mm

# Chiave dinamometrica Torqui



## Torqui- Chiave dinamometrica Aesculap® per tosatrici per cavalli e bovini

Con questa innovativa "chiave dinamometrica" è possibile regolare molto facilmente la pressione delle piastre delle tosatrici per bovini e cavalli Aesculap®.

- regolazione precisa della pressione delle piastre
- aumento della durata della testina grazie a intervalli di riaffilatura più lunghi
- uniformità del taglio nel tempo
- facile da utilizzare
- non necessita di manutenzione
- strumento di precisione
- utilizzabile con tutte le testine Econom



GT147



GT146

Codice	Descrizione
GT146	Torqui- Chiave dinamometrica Aesculap®
GT147	Vite con invito per Torqui, sistema Favorita

AESCULAP® – a B. Braun brand



B.Braun Milano S.p.A | Vet Care | 20161 Milano | Italy

Tel. 02 662181 | [www.bbraun.it](http://www.bbraun.it) | [www.aesculap-clippers.com](http://www.aesculap-clippers.com)

Aesculap – un marchio B.Braun

